

*Premier*



Ergonomía para usted.  
Comodidad para su paciente.

**PREMIER OPERATORY**  
SILLONES, SOPORTES, LÁMPARAS

*Pelton & Crane*

WWW.PELTON.NET

# Premier - Sillones Spirit 1800

El sillón Spirit 1800 posee características esenciales para brindar comodidad al paciente y acceso a la cavidad oral. Obtenga la funcionalidad que necesita a un precio accesible.

Las características estándar como el reposacabezas

de doble articulación, el bloqueo para el giro, y el amplio reposa pies y respaldo estrecho del Spirit 1800, le brindan las ventajas principales de un atractivo sillón, durable y funcional de la marca que usted ya conoce.



## MODELO 1802

Diseño con respaldo tradicional con tapiz aséptico

## Características

### 1. ACCESO MÁXIMO

Porque está diseñado profesionalmente pensando en usted, el respaldo y el reposacabezas le permiten experimentar la eficiencia ergonómica. El modelo con respaldo angosto de tan solo 11.5 pulgadas en la parte superior proporciona un máximo acceso a la cavidad oral, y le permite mantener una postura adecuada. El reposacabezas de doble articulación tiene el ángulo correcto y la opción de ajustarse en la posición más cómoda para su paciente.

### 2. TECNOLOGÍA DE MASAJE ERGOSOOthe™

Los sillones de la configuración Premier vienen equipados con la tecnología ErgoSoothe™, el primer sistema de masaje en el mundo integrado a un sillón dental. Brinda comodidad a su paciente sin interferir con su práctica profesional.

### 3. AMPLIO REPOSAPIES

El asiento bien diseñado de espuma junto con el reposapiés del sillón 1800 le brindan soporte y comodidad al paciente incluso durante procedimientos prolongados.

### 4. TABLEROS

Los tableros integrados duales en los soportes de los brazos permiten el fácil control de las funciones del sillón sin moverse de lugar. Estará al alcance de su mano el control de hasta 4 posiciones del sillón, el freno electrónico de giro, y una lámpara opcional.

# Diseño Inteligente



## MODELO 1802

Diseño con respaldo tradicional con tapiz aséptico

El sillón Spirit 1800 le ofrece diferentes opciones de estilo. Elija entre un respaldo tradicional o uno angosto con tapiz aséptico para el fácil control de infecciones. Ambos diseños permiten un acceso cómodo a la cavidad oral y al mismo tiempo le permiten mantener una postura adecuada y le proporcionan al paciente una relajación óptima.

## BANCOS SPIRIT



## MODELO 2004

Banco para asistente con soporte opcional

## MODELO 2003

Banco para doctor

## Características

### 1. SOPORTE PARA EL ASISTENTE

El soporte para la espalda se ajusta verticalmente con un rango de 4".



### 2. INCLINACIÓN DEL RESPALDO Y SOPORTE LUMBAR

El ajuste de inclinación en el banco del doctor libera la presión de las pantorillas, incrementando la comodidad para realizar el trabajo.



### 3. PALANCAS

Las palancas ajustables le permiten cambiar la altura del asiento y la inclinación del respaldo sin levantarse.



### 4. RUEDAS

Cuentan con 5 ruedecillas duales en una base de aluminio para estabilidad y durabilidad adicional.



# *Premier* - Soporte lateral Spirit 3000

Integración y ergonomía diseñados para usted.

El soporte lateral Spirit 3000 de Pelton & Crane es su sistema completo de soporte. La integración constante de accesorios premium, junto con la opción de añadir futuras actualizaciones cuando las necesite, hacen del Spirit 3000 una unidad que crece con tu práctica profesional.

Diseñada de manera ergonómica, el asa central del Spirit 3000 y la opción de giro permiten encontrar la posición ideal para cada procedimiento. Las superficies suaves y las uniones mínimas permiten que su limpieza sea fácil, sin dejar atrás su diseño de estilo moderno.



# Innovación a su máxima expresión

## Características

### 1. KAVO MOTOR TLC



¡Su solución todo en uno para la pieza de mano! Combine los beneficios de un motor eléctrico sin escobillas con dos piezas de mano para satisfacer todas sus necesidades de endodoncia, de alta y baja velocidad y de control del torque. El trabajo de endodoncia se lleva a cabo con tan solo tocar un botón. Todos los aditamentos ofrecen una operación precisa y suave con luz, agua y velocidades programables. (opcional).

### 2. POSICIONAMIENTO AVANZADO DE LOS INSTRUMENTOS



Los cuatro soportes duales (90° y 45°) están diseñados de manera óptima para la comodidad del doctor y para separar las piezas de mano. Tendrá un acceso práctico a sus instrumentos y los podrá colocar exactamente donde los necesita. Todas las seis posiciones (cinco posiciones para piezas de mano y una posición para una jeringa) pueden encenderse a través de la activación de aire.

### 3. TABLERO DELUXE



Se encuentra ubicado en el centro para su fácil operación y permite operar sin complicaciones el sillón, la lámpara y las piezas de mano eléctricas, todo desde un área de control central. La pantalla digital de LCD facilita la transición suave y rápida de un procedimiento a otro. (es opcional el ELECTROtorque)

### 4. RANGO DE MOVIMIENTO MEJORADO



El Spirit 3000 se coloca dentro de tu rango de alcance, proporcionando así un acceso cómodo y ergonómico a las piezas de mano y los accesorios. El soporte lateral tiene un giro de 170°, permitiéndote colocarlo en la posición ideal no importando cual sea el procedimiento. El asa central cuenta con un freno neumático suave y una membrana completa para una fácil limpieza.

# Premier

## HELIOS 3000

Con su presentación en el 2008, la Helios 3000 cambió la jugada en el ámbito de las lámparas quirúrgicas. La mezcla de color patentada a través de LED y su tecnología reflectante hacen de Helios 3000 el invento más importante de este tipo en 40 años. Con su presentación en el 2008, la Helios 3000 cambió la jugada en el ámbito de las lámparas quirúrgicas. La mezcla de color patentada a través de LED y su tecnología reflectante hacen de Helios 3000 el invento más importante de este tipo en 40 años.



### TECNOLOGÍA REFLECTANTE DE LED

La luz que sale de HELIOS sale hacia la curva continua de los lentes reflectores y regresa para alumbrar el área requerida (la cavidad oral del paciente). Esta tecnología reflectante proporciona un patrón de luz ideal, reduce el sombreado e incrementa la comodidad del paciente.

### MEZCLA DE COLOR PATENTADA

Olvídense de obtener la luz necesaria en la ventana. Al utilizar una combinación de LEDs multicolores (rojo, verde, azul y ámbar), la temperatura de color de la Helios 3000 puede controlarse con un botón para elegir una temperatura tanto de 5000 °K como de 4200 °K.

Esto es óptimo para eliminar cualquier sombra, con posibilidad de verificar el sombreado en ambas opciones de temperatura, y para evaluar tejido.

### SIN OPCIÓN DE FOTOCURADO

La habilidad de Helios 3000 para controlar la salida de color le permite eliminar la luz azul del espectro de color mientras trabaja con una intensidad de 15,000 LUX. Esta característica innovadora previene la polimerización de materiales de restauración y también provee un campo de iluminación adecuado para trabajar.

Nunca vuelva a apagar o mover las lámparas cuando esté trabajando con resinas o agentes adhesivos.



### LUZ REFLECTANTE DE HELIOS

Luz reflectante para un campo de luz uniforme; los instrumentos pueden colocarse donde sea necesario sin preocuparse por el sombreado.

*W.*

### LUZ DIRECTA TRADICIONAL

Cantidad limitada de luz, los instrumentos expuestos a esta luz pueden crear sombras.



5000° K



4200° K  
Halógeno



Sin curado

# Lámpara Quirúrgica



## RANGO DE MOVIMIENTO




Horizontal



Vertical



3D

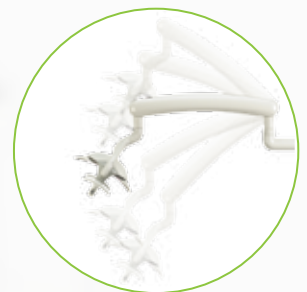

Ajuste vertical

## EFICIENTE Y CONFIABLE

La Helios 3000 consume 70% menos energía que las luces de halógeno convencionales. Con una vida útil de 30,000 horas como mínimo, tenga la seguridad de que está ahorrando valiosa energía y que nunca tendrá que volver a cambiar una bombilla de halógeno otra vez.

## FRÍA AL TACTO

La Helios 3000 nunca se calienta gracias a la tecnología de LED. Es esencialmente más fría que una lámpara de halógeno, los LEDs utilizados en la Helios no representan un riesgo para usted ni su equipo, y además no irradia un calor incómodo.

COMBINACIÓN DE ACCESO  
ERGONÓMICO Y COMODIDAD  
PARA EL PACIENTE

# PREMIER OPERATORY

El sillón Spirit 3000, el soporte lateral  
y las lámparas fueron diseñados pensando  
en usted y sus pacientes. Para más  
información llame al (55) 5279-9630.



Para más información contacte a su distribuidor  
Ormco de México  
Monte Elbruz N° 124, Piso 7, Col. Palmitas Polanco  
C.P. 11560, México D.F.  
Tel. (55) 5279-9630  
Del interior de la república 01 800 000 7620  
[www.kavo.mx](http://www.kavo.mx)



Kavo de México



@kavo\_mx



[www.youtube.com/user/KaVomx](http://www.youtube.com/user/KaVomx)

*Pelton & Crane*