



*Calidad
Contrastada*

Coral lux
unidad dental



FEDESA

Más de 40 años de experiencia fabricando unidades dentales.

Fruto de nuestra larga experiencia y dedicación al sector dental, FEDESA le ofrece una amplia gama de productos con una óptima relación calidad-precio, que supera las expectativas de los profesionales más exigentes. Nuestra actividad está respaldada por las certificaciones internacionales que avalan y garantizan nuestros fabricados. Distribuidores estrictamente seleccionados, colaboran y aseguran una cuidada y continua atención al cliente.



Fachada de planta principal.



FEDESA. Vista nocturna.

Mesa auxiliar móvil

Grupo hídrico

Sillón

Equipo



Unidad dental
Coral lux

Simplicidad y fiabilidad

En un único diseño se ha resuelto la adaptación a diestros y zurdos manteniendo la ergonomía, se facilita la higiene y aumenta la fiabilidad ya que el sillón solo debe elevar al paciente. Un diseño nuevo, que se beneficia de lo mejor de los equipos tradicionales.

*Calidad
Contrastada*



Unidad dental
Coral lux

Diseño



Innovación y funcionalidad. Un equipo, dos alternativas.

Este equipo es la respuesta a los pequeños gabinetes, a la polivalencia y a la higiene, además su aspecto minimalista produce su aceptación por parte de usuarios y pacientes.

Equipo.

Existe en sus dos versiones colgante y Colibrí -r-. En ambos es posible una configuración acorde con los requerimientos. El panel de control liso, la ausencia de aristas y un brazo compensado por pistón de gas harán que su uso sea agradable y el mantenimiento fácil.

Grupo hídrico.

De concepción vertical, con una base de aluminio de dimensiones contenidas, todos los tubos van por su interior, el espacio es suficiente para alojar los diferentes sistemas de aspiración. La taza de vidrio es resistente, y las puertas permiten un acceso fácil para minimizar los tiempos de mantenimiento.

Sillón.

Electromecánico, silencioso, asiento y respaldo de espuma con dureza controlada, apoyacabeza extensible con dos articulaciones, sistema de movimiento de respaldo por guía circular, dispositivos de seguridad en movimientos límites, en bajada de sillón, respaldo y cuando los instrumentos están en giro.




Unidad dental Coral Lux con instalación para diestros.



Unidad dental Coral Lux con instalación para zurdos.

Unidad dental
Coral lux

Versatilidad

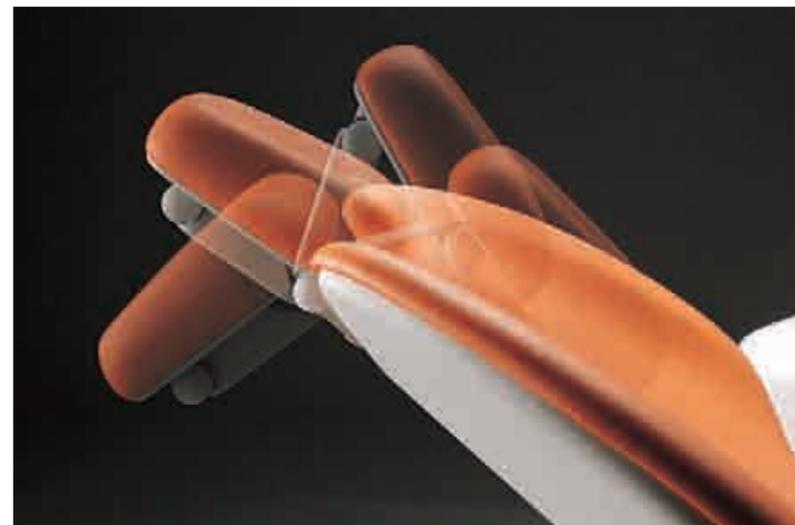

Prestaciones y polivalencia.

Todo se ha previsto para un uso multidisciplinar, el equipo puede complementarse con múltiples opciones, la disposición del conjunto ofrece una gran área para permitir el trabajo a cuatro manos sin obstrucciones de tubos ni cables.

El equipo y la lámpara se pueden colocar en cualquier punto de la zona operatoria y la desinfección del conjunto y la facilidad de la limpieza de la clínica se han considerado prioritarios en su desarrollo.

La forma anatómica del sillón además de mantener posicionado al paciente reduce la fatiga, tanto de paciente como de operador.



Puede equiparse con las prestaciones necesarias con todo tipo de instrumentación, se ha previsto la adaptación a los diversos sistemas de aspiración en uso y las posiciones de memoria y automáticas le permiten particularizar con cada paciente.

Unidad dental
Coral lux

Prestaciones



Unidad dental
Coral lux

Prestaciones



Prestaciones especiales.

Las nuevas tecnologías son posibles, la cámara intraoral, los micromotores eléctricos con luz, lámpara de polimerización a led, sistemas de separación de amalgama, jeringas con luz y agua caliente etc...





Unidad dental
Coral lux

Seguridad



Alto nivel de seguridad.

Dispone de sistemas de seguridad en bajada de sillón, bajada de respaldo, sistema orbital en soporte de cánulas, y el sillón permanece inmóvil en tanto algún instrumento rotatorio esté en giro.

Las formas redondeadas y los espacios entre partes móviles garantizan la ausencia de problemas de seguridad.





Unidad dental
Coral lux

Equipamiento Auxiliar



Opciones y complementos.

Para su adaptación a la odontología actual se ha previsto la posibilidad de complementar la composición básica de modulo para turbina con luz y micromotor eléctrico con módulos adicionales de instrumentación rotatoria, lámpara de polimerización, limpiadores de ultrasonidos, aspiración quirúrgica, jeringa adicional en soporte de cánulas móvil, separador de líquidos centrífugo, etc...



Ref. 801003



Ref. 801004



Ref. 801006



Ref. 801010



Ref. 801011



Ref. 801012



Ref. 801013




Ref. 801014



Ref. 801015



Ref. 801016

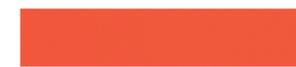

Ref. 801017



Ref. 801018



Ref. 801020

Unidad dental
Coral lux

*Equilibrio
Calidad-Precio*




Relación calidad-precio excelente.

El lanzamiento de este equipo se ha realizado conjuntamente con las oportunas y específicas inversiones que nos permiten contener los costes aumentando la calidad tanto de componentes como de producto final.



El valor de la inversión se mantendrá durante mucho tiempo, dado que su ampliación con otras opciones es posible realizarla posteriormente.

Fedesa dispone de una amplia gama de colores y texturas en su catálogo de tapicerías. Todas ellas son ignífugas, lavables, resistentes y sin costuras.

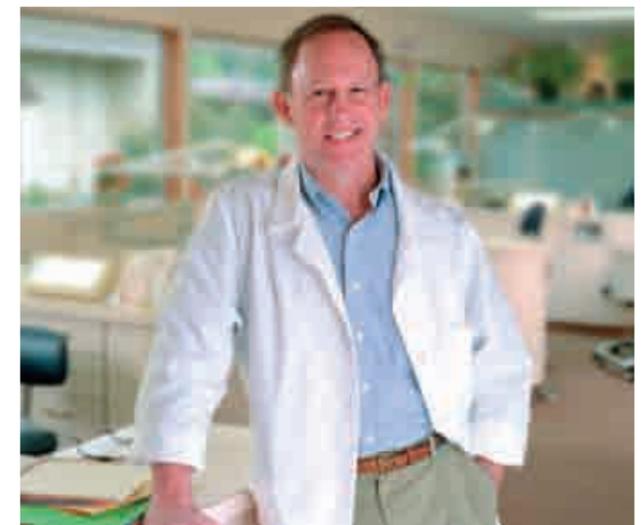


Unidad Dental

Las medidas indicadas de planta y alzado le ayudaran a situar el equipo en el lugar idóneo de su gabinete.

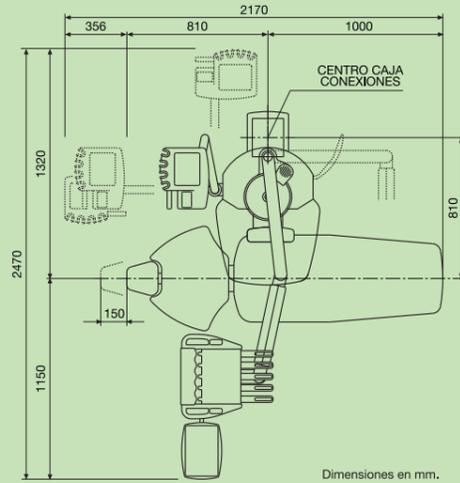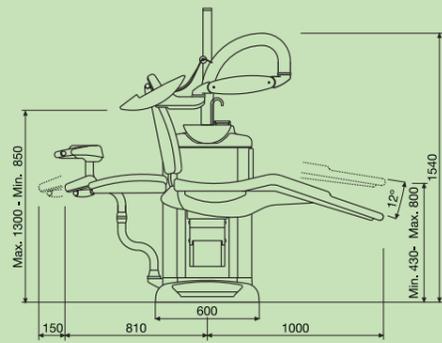


Equipo instalado para diestros.

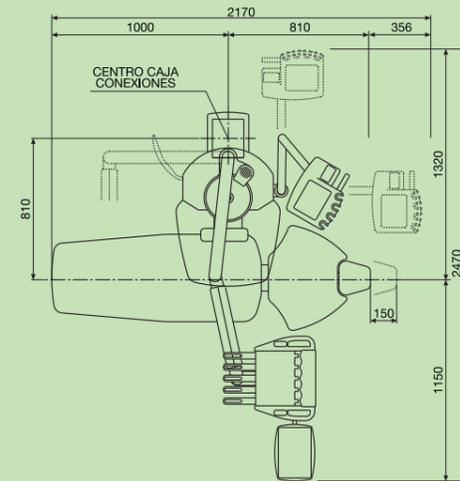

Equipo instalado para zurdos.


Sillón

Se adapta perfectamente al paciente y trabajo a realizar.

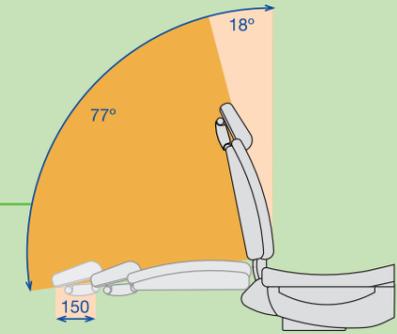


Grupo Hídrico

Sus medidas contenidas y el giro de 90° permiten el acceso cómodo del auxiliar.

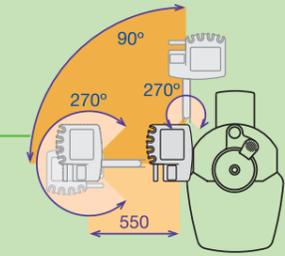

Equipo

El brazo articulado de la bandeja posibilita su colocación en cualquier parte de la zona operatoria.

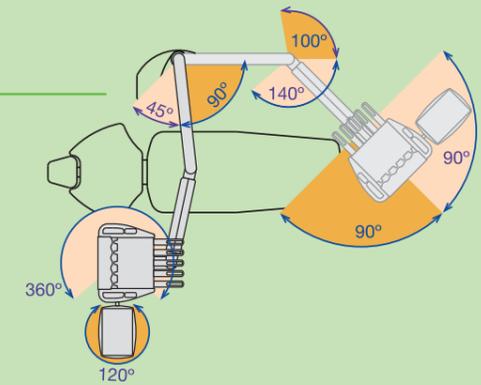

Unidad dental
Coral lux

*Datos
Técnicos*

